



MESI

Simplifying Diagnostics

Leitfaden


MESI mTABLET

Kabelloses medizinisches Tabletsystem


PACKUNGSINHALT

Medizinische Tableteinheit


Modell
MTABMD

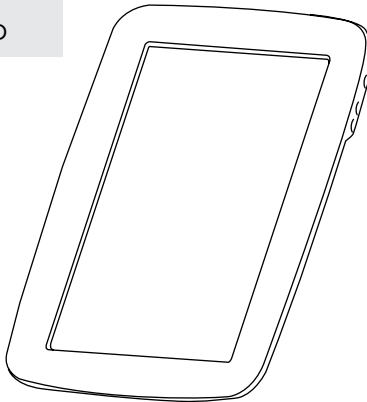

Abgeschirmtes Ethernet-Kabel - 2m

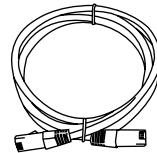


AC/DC Netzteil für MTABDSW

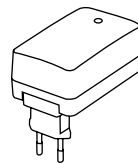

MESI mTABLET Dockingstation mit Zugangspunkt


Modell
mTABDSMDW

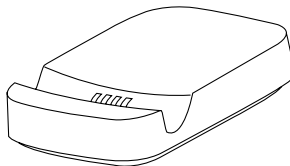

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Empfehlungen hier: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.


ERSTE ANWENDUNG

1. Dock anschließen

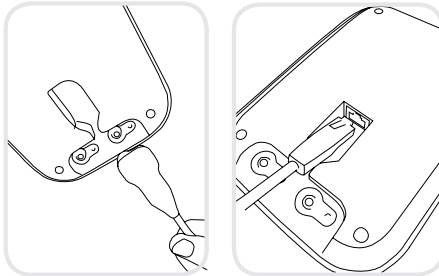

Schließen Sie Ihre Ladestation mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil an das Stromnetz an.

2. MESI mTABLET einrichten

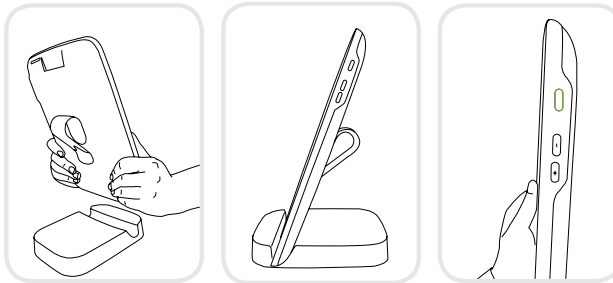

Stellen Sie vor der ersten Benutzung MESI mTABLET auf die Ladestation auf die Ladestation, um es vollständig aufzuladen. Wenn MESI mTABLET geladen ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf der rechten Seite des Tablets, um das Gerät einzuschalten.

3. Erster Bootvorgang



Da das MESI mTABLET mehrere Sprachen anbietet, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die **Sprache**, die Sie verwenden möchten. Diese Einstellung kann später in den Benutzereinstellungen geändert werden.

Wenn ein anderes drahtloses Netzwerk gewünscht wird, wählen Sie es bitte aus der Liste aus und geben Sie Sicherheitsinformationen ein.

Wi-Fi ist für die wesentlichen Funktionen des MESI mTABLET nicht erforderlich, aber es ist notwendig, dass die Messungen mit der Webanwendung MESI mRECORDS synchronisiert werden.

KOPPLUNGSDIAGNOSEMODUL

Bevor eine Aufzeichnung durchgeführt werden kann, muss das entsprechende Modul mit Ihrem MESI mTABLET gekoppelt werden. Bitte nehmen Sie das MESI mTABLET und öffnen Sie die Registerkarte Benutzer.




Schritt 1

Gehen Sie zu **Benutzerprofil** > **Einstellungen** > **Module** > **Module#** > **#+Modul hinzufügen**


Schritt 2

Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des entsprechenden Moduls.

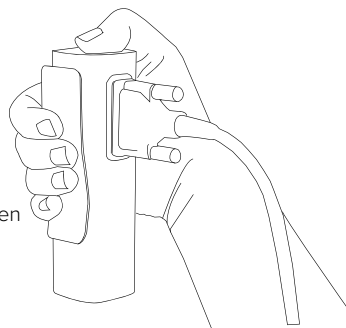

Schritt 3

Wenn das MESI mTABLET eine Verbindung mit dem Modul herstellt, ändert sich die Beleuchtung auf der Oberseite des Moduls. Bestätigen Sie den Kopplungsvorgang, indem Sie die Taste auf der Oberseite des Moduls erneut drücken.

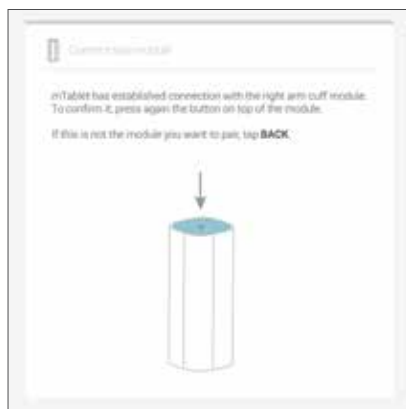

Schritt 4

Der letzte Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem MESI mTABLET und dem Funkmodul an. Alle technischen Informationen zu den angeschlossenen Modulen finden Sie unter **Benutzerprofil** > **Einstellungen** > **Module**.



WARNHINWEISE



Die Benutzer von MESI mTABLET müssen für die Bedienung des Geräts ausreichend geschult sein. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und die Anweisungen zur Verwendung des angeschlossenen Geräts befolgen.



Verwenden Sie nur Zubehör und andere Teile, die von MESI empfohlen oder geliefert werden. Die Verwendung anderer als empfohlener oder gelieferter Teile kann zu Verletzungen, ungenauen Informationen und/oder Schäden am Gerät führen.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen, in denen das Vorhandensein von entzündbaren Gasen, wie z.B. Anästhetika, besteht.



Das AC/DC-Netzteil muss an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden (das AC/DC-Netzteil dient auch zur galvanischen Trennung). Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, demontieren Sie das Gerät nicht. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die zu warten sind. Wenden Sie sich bei der Wartung nur an qualifiziertes Personal.



Zur Reinigung des Gerätes keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.



Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sowie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Schützen Sie das Gerät außerdem vor mechanischer Beanspruchung und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, da dies dazu führen kann, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Führen Sie Reparaturen jeglicher Art niemals selbst durch. Öffnen Sie das Gerät nicht. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können. Das Gerät darf nicht verändert oder angepasst werden. Wenn ein Defekt auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Distributor.

HÄNDLERDATEN

KONTAKTINFORMATIONEN

Adresse MESI, development of medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slowenien, Europäische Union

Telefon +386 (0)1 620 34 87
E-Mail info@mesimedical.com
Webseite www.mesimedical.com

Benutzerkonten

1. Registrieren Sie Ihr Benutzerkonto



Jeder Benutzer, der auf das MESI mTABLET zugreift, muss ein Konto registrieren, das ihm auch den sicheren Zugriff auf Daten auf anderen Geräten (PC, Tablet oder Telefon, falls erforderlich) ermöglicht.

2. Arbeitsgruppen



Jeder Arzt kann Eigentümer nur einer Arbeitsgruppe sein, kann aber in mehrere Arbeitsgruppen eingeladen werden. Gleichzeitig kann er mehrere Krankenschwestern oder Ärzte in seine Arbeitsgruppe aufnehmen. Krankenschwestern hingegen können Teil vieler Arbeitsgruppen sein, aber sie können keine anlegen oder weitere Personen hinzufügen. Dieses System ermöglicht eine bessere Übersicht über den Zugriff auf Patientendaten.

MESI mRECORDS

MESI mRECORDS kann mit den gleichen Benutzer-Logindaten wie MESI mTABLET unter <https://mrecords.mesimedical.com> aufgerufen werden. Da es sich bei mRECORDS um eine Web-App handelt, haben Sie damit von überall und jederzeit Zugriff. Alle Messungen und Patientendaten werden zwischen MESI mTABLET und MESI mRECORDS synchronisiert, so dass der Mediziner sofort Zugriff auf die aufgezeichnete Messung hat.

Für weitere Informationen und Tutorials loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie Ihr Konto unter <https://mrecords.mesimedical.com>.

