



# MESI

Simplifying Diagnostics

## Pikaopas


### MESI mTABLET

Langaton lääkinällinen tablettijärjestelmä


#### MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?

Lääkinällisen tason tablettiyksikkö


**Malli**  
MTABMD

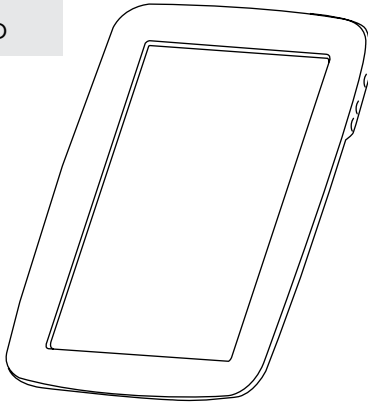

Suojattu ethernet-kaapeli - 2 m

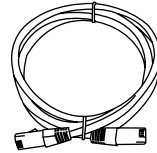


AC/DC-verkkolaite MTABDSW-  
laitteelle.

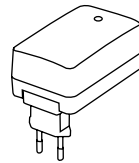

MESI mTABLET -telakointi- ja tukiasema.


**Malli**  
mTABDSMDW

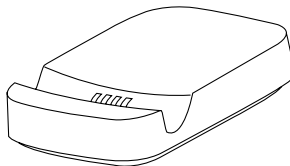

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja noudata seuraavia suosituksia: [www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET](http://www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET).


# ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

## 1. Kytkeä telakointiasemaan

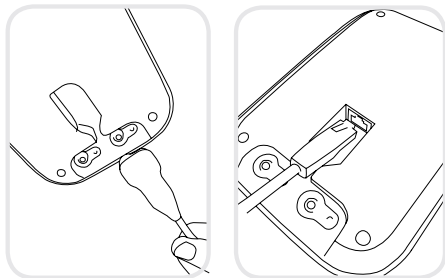

Kytke latausasema verkkovirtaan ja lähiverkkoon toimituksen mukana tulleella verkkokaapelilla ja virta-adapterilla.

## 2. MESI mTABLET -laitteen käyttöönotto

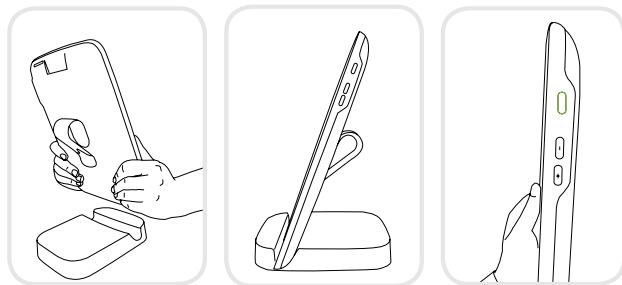

Laita MESI mTABLET -laite ennen ensimmäistä käyttökertaa lataustelakkaan ja lataa akku täyteen.

Kun MESI mTABLET -laite on ladattu, kytke laite päälle painamalla tabletin oikealla puolella olevaa ON/OFF -painiketta.

## 3. Ensimmäinen käynnistys



MESI mTABLET -laitetta voidaan käyttää useilla eri kielillä. Valitse haluamasi **kieli** pudotusvalikosta. Voit vaihtaa asetuksia myöhemmin käyttäjäasetuksista.

MESI mTABLETin lataustelakassa on **sisäänrakennettu Wi-Fi-tukiasema**, johon MESI mTABLET ottaa automaattisesti yhteyttä ensimmäisellä käyttökerralla.

Jos haluat mieluummin käyttää toista langatonta verkkoyhteyttä, valitse se luettelosta ja anna suojaustiedot.

Wi-Fi-yhteys ei ole välttämätön MESI mTABLETin perustoimintojen kannalta, mutta sitä tarvitaan mittausten synkronoimiseksi MESI mRECORDS -verkkosovelluksiin.

## DIAGNOSTIIKKAMODUULIN LINKITYS

Ennen kuin yhtään tallennetta voidaan suorittaa, on asianmukainen moduuli linkitettävä MESI mTABLET laitteeseesi. Ota MESI mTABLET ja avaa käyttäjävälilehti.




### Vaihe 1

Siirry kohtaan **Käyttäjäprofiili > Asetukset > Moduulit > +Lisää moduuli**


### Vaihe 2

Paina asianmukaisen moduulin yläosassa olevaa painiketta.

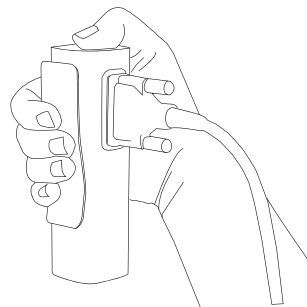

### Vaihe 3

Kun MESI mTABLET muodostaa yhteyden moduuliin, moduulin yläosassa oleva valo vaihtuu. Vahvasta linkitysprosessi painamalla moduulin yläosassa olevaa painiketta uudestaan.

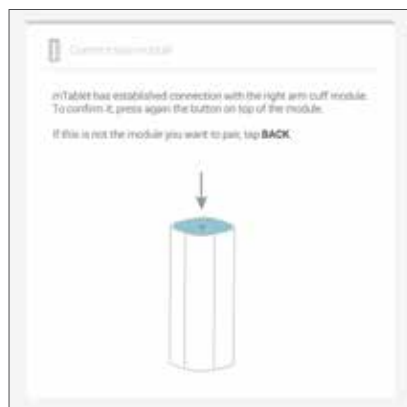

### Vaihe 4

Viimeinen ruutu näyttää, että yhteyden muodostaminen MESI mTABLETin ja langattoman moduulin välillä onnistui. Pääset kaikkiin liitettyjä moduuleja koskeviin teknisiin tietoihin kohdasta **Käyttäjäprofiili > Asetukset > Moduulit**.



## VAROITUKSET



MESI mTABLET -laitteen käyttäjien on saatava asianmukainen koulutus laitteen käyttöön. Käyttäjien on luettava laitteen käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja noudatettava liitettävien laitteiden käyttöohjeita.



Käytä vain MESIn toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita tai osia. Muiden kuin suositeltujen tai toimitettujen osien käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia, tietojen epätarkkuutta ja/tai vaurioita yksikölle.



Älä käytä tätä yksikköä alueilla, joilla on olemassa räjähdysvaara tai joilla on syttyviä kaasuja, esim. anesteettisia aineita.



AC/DC-verkkolaite on kytkettävä pistorasiaan, joka on helposti käytettävissä (AC/DC-verkkolaite myös eristää galvaanisesti). Älä pura laitetta välttääksesi sähköiskuja. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia. Anna huoltotyöt vain pätevän henkilöstön tehtäväksi.



Käytä laitteen puhdistukseen vain ei-syövyttäviä puhdistusaineita. Laite voidaan pyyhkiä kostealla pyyhkeellä.



Suojaa laite kosteudelta, nesteltä ja äärimmäisen korkeilta/matalilta lämpötiloilta. Suojaa laite myös mekaaniselta rasitukselta äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle, sillä se saattaa johtaa laitteen väärään toimintaan.



Älä koskaan suorita itse minkäänlaisia korjauksia. Älä avaa laitetta. Laitteessa ei ole osia, jotka käyttäjä voisi itse vaihtaa. Älä muuta tai muokkaa laitetta. Jos vikoja ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai jakelijaan.

## JÄLLEENMYYJÄN TIEDOT

### MESIn YHTEYSTIEDOT

**Osoite** MESI, development of medical devices, Ltd.  
Letališka cesta 3C  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia, Euroopan Unioni

**Puhelin** +386 (0)1 620 34 87  
**Sähköposti** info@mesimedical.com  
**Verkkosivusto** www.mesimedical.com

# KÄYTTÄJÄTILIT

## 1. Rekisteröi käyttäjätilisi



The screenshot shows the 'Register' screen in the Mesi app. It features a 'Login' button on the left and a 'Register' button on the right. The registration form includes fields for: Email, Password, Confirm password, Gender, Date of birth, and Location. There are also radio buttons for 'Doctor' and 'Nurse', and a 'Terms and agreement' section with a 'Log in to Mesi' link. A green 'Register' button is at the bottom.



The screenshot shows the 'Profile picture' selection screen. It displays a grid of 12 different avatars. Below the grid are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'.

Jokaisen MESI mTABLETin käyttäjän on rekisteröitävä tili, jonka kautta tietoihin voidaan päästä turvallisesti myös muilla laitteilla (henkilökohtaiselta tietokoneelta, tabletilta tai tarvittaessa puhelimella).

## 2. Työryhmät



The screenshot shows the 'Working group' creation screen. It displays a message: 'We have created a new working group Carlos Blanco'. Below this, there are fields for: Country (dropdown), Sector (dropdown), Practice name, Practice phone number, Practice fax number, Practice address, Practice email (dropdown), and Practice website. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'OK' buttons.

Jokaisella lääkäriellä voi olla vain yksi työryhmä, mutta se voidaan jakaa useampiin työryhmiin. Samalla hän voi lisätä useampia sairaanhoitajia tai lääkäreitä omaan työryhmäänsä. Sairaanhoitajat voivat kuitenkin olla osa useampaa työryhmää, mutta he eivät voi luoda työryhmää tai lisätä siihen henkilöitä. Tämä järjestelyn avulla saadaan parempi yleiskuva potilastiedoista.

## MESI mRECORDS

MESI mRECORDS -tietoihin pääsee samoilla käyttäjän sisäänkirjautumistiedoilla kuin MESI mTABLET -tietoihin osoitteessa <https://mrecords.mesimedical.com>. Koska mRECORDS on verkkosovellus, pääset sen tietoihin mistä ja milloin tahansa. Kaikki mittaustulokset ja potilastiedot synkronoidaan MESI mTABLET -tietojen ja MESI mRECORDS -tietojen välillä, jolloin hoitohenkilökunta pääsee välittömästi katsomaan tallennettuja tietoja.

Kirjaudu sisään katsoaksesi lisätietoja ja opetusohjelmia tai rekisteröi tilisi osoitteessa <https://mrecords.mesimedical.com>.

