



MESI

Simplifying Diagnostics

Korte handleiding


MESI mTABLET

Draadloos medisch tabletsysteem (Wireless Medical Tablet System)


WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Tablet voor medische toepassingen


Model
MTABMD

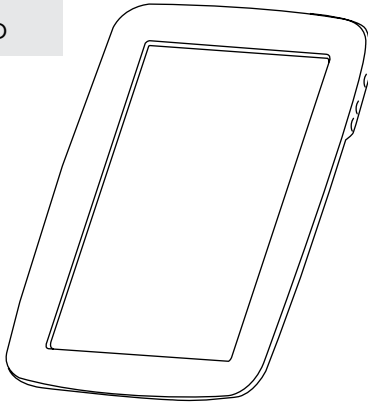

Afgeschermd ethernetkabel - 2 m

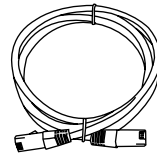


AC/DC voeding voor MTABDSW.

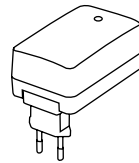

MESI mTABLET basisstation met toegangspunt.

Model
mTABDSMDW

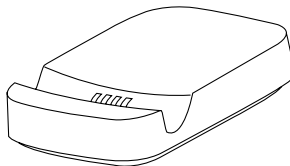


Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het toestel voor het eerst gebruikt, en volg deze aanbevelingen:

www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

EERSTE GEBRUIK

1. Het basisstation aansluiten

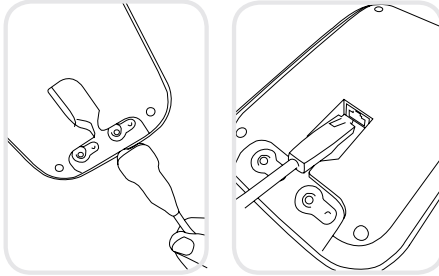

Sluit uw basisstation aan op voeding en op het lokale netwerk met de bijgeleverde netwerkkabel en stroomadapter.

2. Installatie van MESI mTABLET



Vóór het eerste gebruik plaatst u de MESI mTABLET op het basisstation om het volledig op te laden.

Wanneer de MESI mTABLET is opgeladen, drukt u op de AAN/UIT-knop aan de rechterkant van de tablet om het toestel aan te zetten.

3. Eerste start



De MESI mTABLET biedt verschillende talen aan; selecteer de **taal** die u wenst te gebruiken in het afrolmenu. Deze instelling kan later worden gewijzigd in de gebruikersinstellingen.

Het basisstation voor de MESI mTABLET heeft een **ingebouwd Wi-Fi-toegangspunt** waarmee de MESI mTABLET automatisch de verbinding maakt bij het eerste gebruik.

Als u een ander draadloos netwerk wenst te gebruiken, selecteer het in de lijst en voer de veiligheidsinformatie in.

Er is geen Wi-Fi vereist voor de hoofdfuncties van de MESI mTABLET, maar Wi-Fi is wel nodig om metingen te synchroniseren naar de MESI mRECORDS webapplicatie.

DIAGNOSTISCHE MODULE KOPPELEN

Voordat er metingen kunnen worden uitgevoerd, moet de betreffende module eerst aan uw MESI mTABLET worden gekoppeld. Neem de MESI mTABLET en open de gebruikerstab.




Stap 1

Ga naar **Gebruikersprofiel** > **Instellingen** > **Modules** > **+Module toevoegen**


Stap 2

Druk op de knop bovenaan de betreffende module.

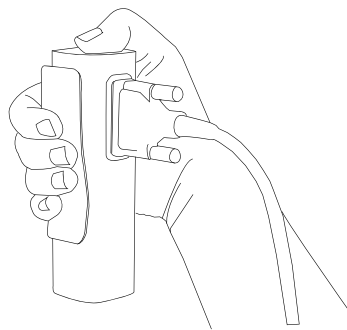

Stap 3

Wanneer de MESI mTABLET de verbinding maakt met de module, verandert het lampje bovenaan de module. Bevestig het aankoppelingsproces door de knop bovenaan de module opnieuw in te drukken.

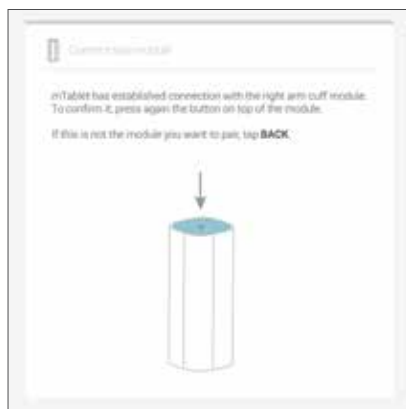

Stap 4

Het laatste scherm meldt de geslaagde verbinding tussen de MESI mTABLET en de draadloze module. U kunt alle technische informatie over de verbonden modules vinden in **Gebruikersprofiel** > **Instellingen** > **Modules**.



OPGELET



Gebruikers van de MESI mTABLET moeten adequaat geïnstrueerd zijn om het toestel te gebruiken. Vóór het eerste gebruik van het toestel, moeten de gebruikers de volledige gebruiksinstructies zorgvuldig lezen en de gebruiksinstructies van de verbonden uitrusting volgen.



Gebruik alleen toebehoren en andere onderdelen die aanbevolen of geleverd worden door MESI. Gebruik van andere onderdelen, buiten wat aanbevolen of meegeleverd wordt, kan tot letsel, onnauwkeurige informatie en/of schade aan het toestel leiden.



Gebruik dit toestel niet waar gevaar op explosie bestaat of in de nabijheid van ontvlambare gassen zoals anesthetica.



De AC/DC voeding moet altijd aangesloten zijn op een gemakkelijk te bereiken stopcontact (de AC/DC voeding dient ook als galvanische isolatie). Demonteer het toestel niet, om elektrische schokken te vermijden. Er zitten geen te onderhouden onderdelen in. Laat het onderhoud uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde vaklui.



Gebruik alleen niet-agressieve schoonmaakproducten om het toestel te reinigen. Het toestel mag worden afgeveegd met een vochtige doek.



Bescherm het toestel tegen vocht en vloeistoffen en extreem hoge/lage temperaturen. Bescherm het toestel ook tegen mechanische krachten en stel het niet bloot aan direct zonlicht, want daardoor kan het toestel mogelijk niet goed functioneren.



Voer nooit zelf herstellingen uit, van welke aard ook. Open het toestel niet. Het toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Breng geen wijzigingen aan het toestel aan. Indien het defect raakt, neem contact op met uw verkoper of verdeler.

INFORMATIE VAN DE LEVERANCIER

MESI CONTACTGEGEVENS

Adres MESI, development of medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slovenië, Europese Unie

Telefoon +386 (0)1 620 34 87
E-mail info@mesimedical.com
Website www.mesimedical.com

GEBRUIKERSACCOUNTS

1. Registreer uw gebruikersaccount



Elke gebruiker van de MESI mTABLET moet een account registreren, waarmee hij/zij beveiligde toegang krijgt tot data op andere toestellen (PC, tablet of telefoon, indien nodig).

2. Werkgroepen



Elke arts kan de eigenaar van slechts één werkgroep zijn, maar kan worden uitgenodigd in meerdere werkgroepen. Hij/zij kan tegelijkertijd meerdere verpleegkundigen of artsen aan zijn/haar werkgroep toevoegen. Verpleegkundigen kunnen deel uitmaken van meerdere werkgroepen, maar zij kunnen geen andere persoon of personen toevoegen. Dit systeem biedt een betere controle op de toegang tot patiëntgegevens.

MESI mRECORDS

Toegang tot MESI mRECORDS gebeurt met dezelfde inloggegevens als voor de MESI mTABLET op <https://mrecords.mesimedical.com>. Omdat mRECORDS een webapp is, geeft dit u overal en altijd toegang. Alle metingen en patiëntgegevens worden gesynchroniseerd tussen de MESI mTABLET en MESI mRECORDS, zodat de medische deskundige onmiddellijk toegang krijgt tot een geregistreerde meting.

Voor meer informatie en handleidingen, log in of registreer uw account op <https://mrecords.mesimedical.com>.

