

Skrócona instrukcja


MESI mTABLET

Bezprzewodowy medyczny system do tabletek


CO ZAWIERA PUDEŁKO?

Tablet kategorii medycznej


Model
MTABMD

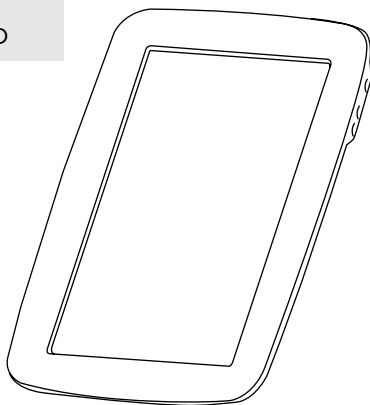

Ekranowany przewód Ethernet
– 2 m

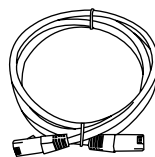


Zasilacz do MTABDSW.

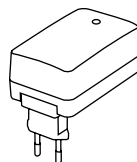

Stacja dokująca MESI mTABLET z punktem dostępowym.

Model
mTABDSMDW

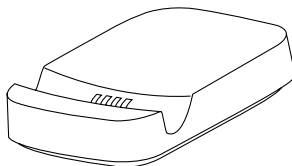


Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję użytkownika i zastosuj się do zaleceń znajdujących się pod adresem:

www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET

PIERWSZE UŻYCIE

1. Podłączenie stacji dokującej

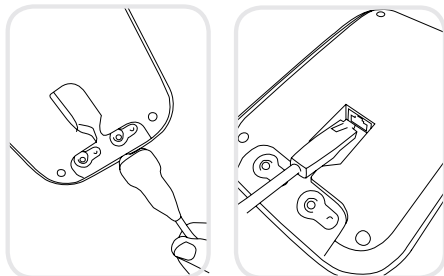

Podłącz stację ładującą do prądu oraz do sieci lokalnej za pomocą kabla sieciowego i dołączonego zasilacza.


2. Instalacja MESI mTABLET



Przed pierwszym użyciem umieść MESI mTABLET na stacji ładującej, aby naładować go w pełni.

Kiedy MESI mTABLET zostanie naładowany, wciśnij przycisk ON/OFF po prawej stronie tabletu, aby włączyć urządzenie.

3. Pierwsze uruchomienie

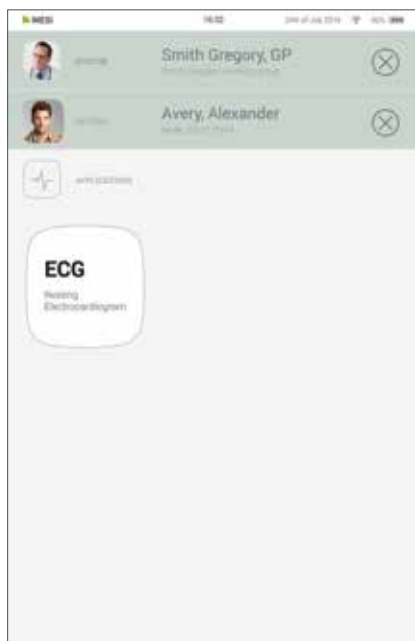

Ponieważ MESI mTABLET umożliwia obsługę w kilku językach, wybierz pożądany **język** z rozwijanego menu. Ustawienie to można później zmienić w ustawieniach użytkownika.

Stacja ładująca MESI mTABLET posiada **wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi**, z którym MESI mTABLET połączy się automatycznie przy pierwszym użyciu.

Jeżeli chcesz wybrać inną sieć bezprzewodową, wybierz ją z listy i podaj hasło zabezpieczające.

Sieć Wi-Fi nie jest konieczna do korzystania z podstawowych funkcji MESI mTABLET, ale jest potrzebna do synchronizacji pomiarów z aplikacją sieciową MESI mRECORDS.

PAROWANIE MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO

Zanim możliwe będzie wykonanie jakichkolwiek zapisów, odpowiedni moduł musi zostać sparowany z MESI mTABLETem. Weź MESI mTABLET i otwórz zakładkę użytkownika.




Krok 1

Wejdź do **Profilu użytkownika** > **Ustawienia** > **Moduły** > **+Dodaj moduł**


Krok 2

Wciśnij przycisk u góry odpowiedniego modułu.

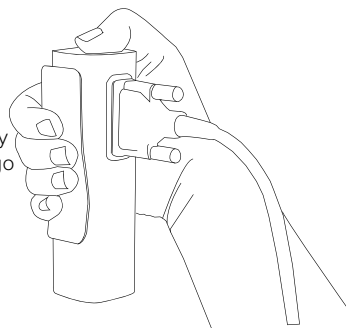

Krok 3

Kiedy MESI mTABLET nawiąże połączenie z modułem, zmieni się kolor światła u góry modułu. Potwierdź procedurę parowania poprzez ponownie przyciśnięcie przycisku u góry modułu.

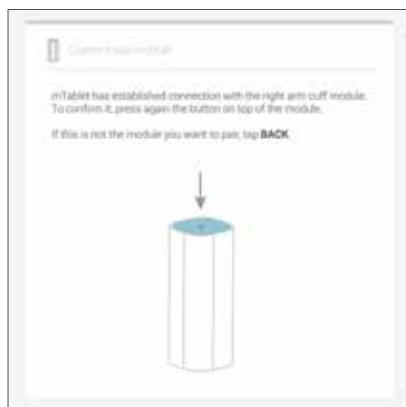

Krok 4

Ekran końcowy wskazuje dokonanie połączenia między MESI mTABLETem a modułem bezprzewodowym. Wszystkie informacje techniczne dotyczące połączonych modułów znajdziesz w **Profilu użytkownika** > **Ustawienia** > **Moduły**.



OSTRZEŻENIA



Użytkownicy urządzeń MESI mTABLET muszą być odpowiednio przeszkoleni do ich obsługi. Przed pierwszym użyciem urządzenia użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z pełną instrukcją użytkowania i do przestrzegania instrukcji dotyczących korzystania z podłączonego wyposażenia.



Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów i innych części zalecanych lub dostarczanych przez MESI. Korzystanie z części innych niż zalecane lub dostarczane może powodować urazy, negatywnie wpływać na dokładność danych i/lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Nie wolno używać urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu lub w których obecne są łatwopalne gazy, takie jak środki znieczulające.



Zasilacz należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego (zasilacz stanowi także barierę galwaniczną). Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie należy rozkładać urządzenia na części. Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających obsługi. Obsługę serwisową należy powierzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.



Do czyszczenia urządzenia można stosować wyłącznie chemicznie obojętne środki czyszczące. Urządzenie można przecierać wilgotną szmatką.



Należy chronić urządzenie przed wilgocią i płynami, a także przed skrajnie wysoką/niską temperaturą. Należy również chronić urządzenie przed naprężeniami mechanicznymi i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zakłócać poprawne działanie urządzenia.



Nigdy nie podejmuj samodzielnie żadnych napraw. Nie otwierać urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które nadają się do wymiany przez użytkownika. Nie wolno zmieniać ani adaptować urządzenia. Jeżeli wystąpi usterka, skontaktuj się z dealerem lub dystrybutorem.

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

DANE KONTAKTOWE MESI

Adres MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Słowenia, Unia Europejska

Telefon +386 (0)1 620 34 87
E-mail info@mesimedical.com
Strona internetowa www.mesimedical.com

KONTA UŻYTKOWNIKÓW

1. Rejestracja konta użytkownika



Każdy użytkownik mający dostęp do MESI mTABLETu musi zarejestrować konto, które umożliwi mu także bezpieczny dostęp do danych na innych urządzeniach (komputerze osobistym, tablecie lub telefonie w razie konieczności).

2. Grupy robocze



Każdy lekarz może być właścicielem tylko jednej grupy roboczej, ale może być zapraszany do wielu grup roboczych. Jednocześnie może dodawać wiele pielęgniarek i lekarzy do swojej grupy roboczej. Z kolei pielęgniarki mogą należeć do wielu grup roboczych, ale nie mogą ich tworzyć ani dodawać kolejnych osób. Taki system umożliwia większy nadzór nad dostępem do danych pacjentów.

MESI mRECORDS

Dostęp do MESI mRECORDS można uzyskać za pomocą takich samych danych logowania użytkownika jak do urządzenia MESI mTABLET na stronie: <https://mrecords.mesimedical.com>. Ponieważ mRECORDS jest aplikacją sieciową, która zapewnia dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, wszystkie pomiary i dane pacjentów są zsynchronizowane między urządzeniem MESI mTABLET a aplikacją MESI mRECORDS, w ten sposób zapewniając specjalistom natychmiastowy dostęp do zapisanych pomiarów.

Dodatkowe informacje i samouczki dostępne są po zalogowaniu lub zarejestrowaniu konta na stronie:

<https://mrecords.mesimedical.com>.

