



MESI

Simplifying Diagnostics

Ghid rapid


mTABLET MESI

Sistem wireless cu tabletă de uz medical


CE CONȚINE CUTIA?

Unitate de tabletă de uz medical


Model
MTABMD

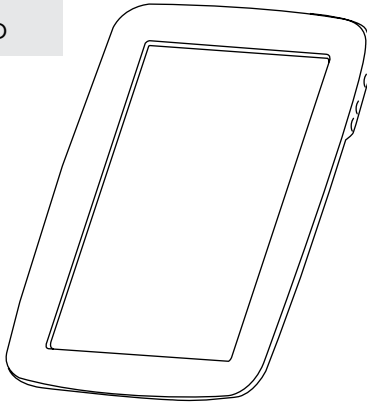

Cablu coaxial pentru internet, 2 m

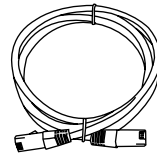


Sursă de alimentare c.a./c.c. Pentru MTABDSW.

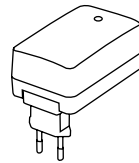

Stație de andocare pentru mTABLET MESI cu punct de acces.


Model
mTABDSMDW

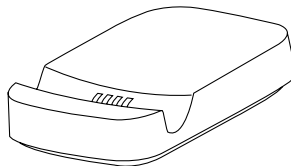

Înainte de prima utilizare a dispozitivului, citiți cu atenție manualul utilizatorului și urmați recomandările de aici: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

PRIMA UTILIZARE

1. Conectarea stației de andocare

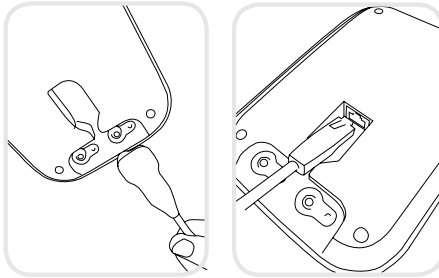

Conectați stația de încărcare la rețeaua de curent și la rețeaua locală de internet, folosind cablul de internet și adaptorul de curent incluse în ambalaj.

2. Configurarea mTABLET MESI



Înainte de prima utilizare, plasați mTABLET MESI în stația de încărcare pentru o încărcare completă.

După ce mTABLET MESI s-a încărcat, apăsați pe butonul PORNIT/OPRIT din partea dreaptă a tabletei, pentru a porni dispozitivul.

3. Prima inițializare



Deoarece meniul mTABLET MESI este disponibil în mai multe limbi, selectați din meniul derulant vertical **limba** pe care vreți să o folosiți. Această setare poate fi modificată ulterior din setările utilizatorului.

Stația de încărcare a mTABLET MESI este prevăzută cu un **punct de acces Wi-Fi încorporat**, la care mTABLET MESI se va conecta automat la prima utilizare.

Dacă vreți să folosiți altă rețea wireless, selectați-o din listă și introduceți informațiile de securitate.

Conexiunea Wi-Fi nu este necesară pentru funcțiile esențiale ale mTABLET MESI, dar este necesară pentru sincronizarea măsurătorilor cu aplicația web mRECORDS MESI.

ASOCIEREA MODULULUI DE DIAGNOSTIC

Înainte de a putea fi efectuate înregistrări, trebuie să fie asociat modulul corespunzător cu mTABLET MESI. Luați mTABLET MESI și deschideți fila utilizatorului.




Pasul 1

Deschideți **Profilul utilizatorului > Setări > Module > +Adăugare modul**

Pasul 2

Apăsați butonul de deasupra modulului corespunzător.

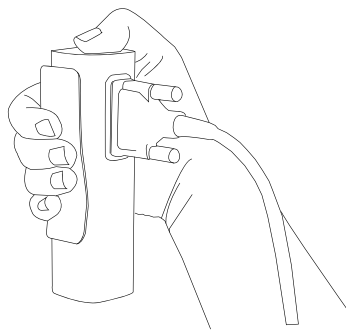

Pasul 3

Atunci când mTABLET MESI stabilește conexiunea cu modulul, indicatorul luminos de deasupra modulului se va modifica. Confirmați procesul de asociere, apăsând din nou pe butonul de deasupra modulului.



Pasul 4

Ecranul final indică stabilirea cu succes a conexiunii dintre mTABLET MESI și modulul wireless. Aveți acces la toate informațiile tehnice despre modulele conectate din **Profilul utilizatorului > Setări > Module**.



AVERTISMENTE



Utilizatorii mTABLET MESI trebuie să fie instruiți în mod adecvat pentru a utiliza dispozitivul. Înainte de prima utilizare a dispozitivului, utilizatorii trebuie să citească cu atenție, în întregime, instrucțiunile de utilizare și să respecte instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor conectate.



Utilizați numai accesoriile și alte piese recomandate sau furnizate de MESI. Utilizarea altor piese decât a celor recomandate sau furnizate poate cauza rănirea, informații incorecte și/sau deteriorarea unității.



Nu utilizați această unitate în zone în care există pericol de explozie sau în prezența gazelor inflamabile, cum sunt cele pentru anestezie gazoasă.



Sursa de alimentare c.a./c.c. trebuie să fie conectată la o priză ușor accesibilă (sursa de alimentare c.a./c.c. servește și drept izolație galvanică). Pentru a preveni electrocutarea, nu dezasamblați unitatea. În interiorul acesteia nu există piese pe care le puteți depana. Pentru operațiuni de service, apelați numai la personal calificat.



Pentru a curăța dispozitivul, folosiți numai substanțe de curățare neagresive. Dispozitivul poate fi șters cu o cârpă umedă.



Protejați dispozitivul de umezeală, de lichide și de temperaturi extrem de mari/mici. De asemenea, protejați dispozitivul de suprasolicitare mecanică și nu îl expuneți la lumină solară directă, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea incorectă a dispozitivului.



Nu efectuați niciodată niciun fel de reparații dvs. personal. Nu deschideți dispozitivul. Dispozitivul nu conține nicio piesă care poate fi înlocuită de utilizator. Nu modificați și nu adaptați dispozitivul. Dacă survine un defect, consultați-vă cu reprezentanța sau distribuitorul.

INFORMAȚII DESPRE DISTRIBUITOR

INFORMAȚIILE DE CONTACT ALE MESI

Adresa MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, Uniunea Europeană

Telefon +386 (0)1 620 34 87
E-mail info@mesimedical.com
Website www.mesimedical.com


CONTURILE UTILIZATORILOR

1. Înregistrați-vă contul de utilizator



Fiecare utilizator care accesează mTABLET trebuie să-și înregistreze un cont, ceea ce îi va permite accesul la date, în condiții de siguranță, pe alte dispozitive (computer personal, tabletă sau telefon, dacă este necesar).

2. Grupuri de lucru

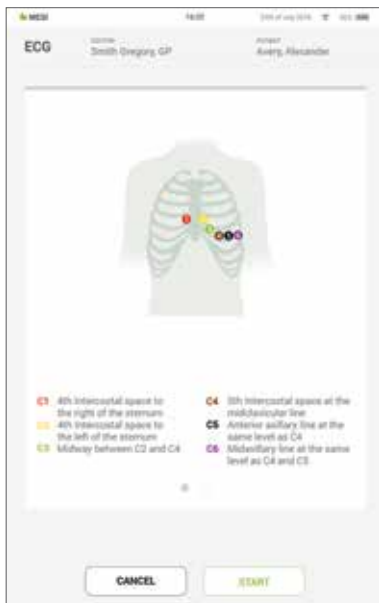

Fiecare medic poate fi deținătorul unui singur grup de lucru, dar poate fi invitat să facă parte din mai multe grupuri de lucru. În același timp, medicul poate adăuga mai mulți asistenți medicali sau medici în grupul său de lucru. Pe de altă parte, asistenții medicali pot face parte din mai multe grupuri de lucru, dar nu pot să creeze grupuri și să adauge membri în grup. Acest sistem permite o mai bună monitorizare a accesului la datele pacienților.

mRECORDS MESI

Aplicația mRECORDS MESI poate fi accesată cu aceleași date de autentificare ale utilizatorului ca mTABLET MESI la <https://mrecords.mesimedical.com>. Deoarece mRECORDS este o aplicație web, aveți accesul asigurat de oriunde, în orice moment. Toate măsurătorile și datele pacienților sunt sincronizate între mTABLET MESI și mRECORDS MESI, oferind astfel accesul instantaneu al medicului specialist la măsurătorile înregistrate.

Pentru mai multe informații și tutoriale, vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați contul pe <https://mrecords.mesimedical.com>.

