

Hitra navodila


MESI mTABLET

Brezžični tablični računalniški sistem za medicinsko uporabo


KAJ JE V PRODAJNEM PAKETU?

Tablični računalnik za medicinsko uporabo


Model
MTABMD

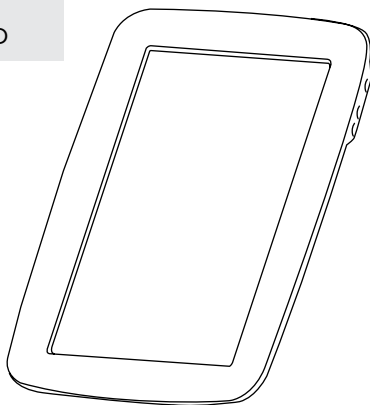

Zaščiten ethernetni kabel – 2 m

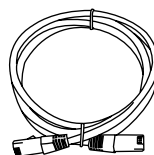


Napajalnik AC/DC za MTABDSW.

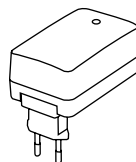

Priklopna postaja MESI mTABLET z dostopno točko.


Model
mTABDSMDW

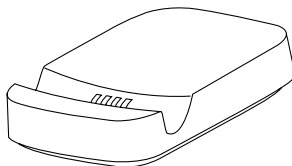

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte priporočila na tej strani: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

PRVA UPORABA

1. Priklop priklopne postaje

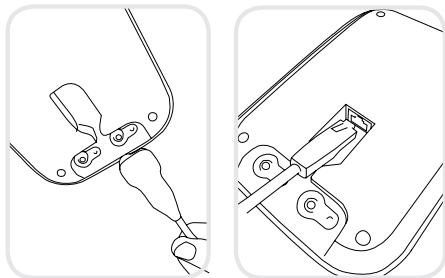

Polnilno postajo priklopite v električno omrežje in lokalno omrežje s priloženim omrežnim kablom in napajalnim adapterjem.

2. Priprava enote MESI mTABLET



Pred prvo uporabo postavite enoto MESI mTABLET na polnilno postajo, da se popolnoma napolni.

Ko se MESI mTABLET napolni, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP na desni strani tablice, da jo vklopite.

3. Prvi zagon



Ker MESI mTABLET ponuja uporabniški vmesnik v več **jezikih**, iz spustnega menija izberite zelenega. To nastavitve lahko pozneje spremenite v uporabniških nastavitvah.

Polnilna postaja za enoto MESI mTABLET ima **vdelano dostopno točko Wi-Fi**, s katero se MESI mTABLET ob prvi uporabi samodejno poveže.

Če želite, da se poveže z drugim brezžičnim omrežjem, ga izberite s seznama in vnesite varnostne podatke.

Funkcija Wi-Fi za osnovne funkcije tablice MESI mTABLET ni potrebna, potrebna pa je za sinhronizacijo snemanj s spletno aplikacijo MESI mRECORDS.

SEZNANITEV Z DIAGNOSTIČNIM MODULOM

Pred izvajanjem snemanja je treba s tablico MESI mTABLET povezati ustrežni modul. V tablici MESI mTABLET odprite uporabniški zavihek.




1. korak

Odprite meni **User profile (Uporabniški profil) > Settings (Nastavitve) > Modules (Moduli) > +Add module (+Dodaj modul)**

2. korak

Pritisnite gumb na vrhu modula ustreznega modula.

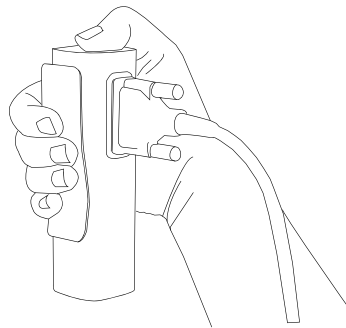

3. korak

Ko MESI mTABLET vzpostavi povezavo z modulom, se lučka na vrhu modula spremeni. Postopek seznanitve potrdite s ponovnim pritiskom gumba na vrhu modula.



4. korak

Končni zaslon vas obvesti o uspešni povezavi med enoto MESI mTABLET in brezžičnim modulom. Vsi tehnični podatki o povezanih modulih so na voljo v meniju **User profile (Uporabniški profil) > Settings (Nastavitve) > Modules (Moduli)**.



OPOZORILA



Uporabniki tablice MESI mTABLET se morajo ustrezno usposobiti za uporabo naprave. Uporabniki morajo pred prvo uporabo naprave natančno prebrati celotna navodila za uporabo in upoštevati navodila za uporabo povezane opreme.



Uporabljajte samo dodatke in druge dele, ki jih priporoča oziroma dobavlja podjetje MESI. Uporaba delov, ki jih podjetje MESI ne priporoča oziroma dobavlja, lahko povzroči poškodbe, netočne podatke in/ali poškodbe enote.



Te enote ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, ali v prisotnosti vnetljivih plinov, kot so anestetiki.



Napajalnik AC/DC morate priključiti na preprosto dostopno vtičnico (napajalnik AC/DC se uporablja tudi kot galvanska izolacija). Za preprečevanje električnega udara enote ne razstavljajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisirali sami. Servisiranje naj opravlja samo usposobljeno osebje.



Za čiščenje naprave uporabljajte samo neagresivna čistila. Napravo lahko obrišete z vlažno krpo.



Napravo zaščitite pred vlago in tekočinami ter izjemno visokimi/nizkimi temperaturami. Napravo zaščitite tudi pred mehansko obremenitvijo in ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi, saj bi to lahko pripeljalo do nepravilnega delovanja.



Nikoli sami ne izvajajte nikakršnih popravil. Naprave ne odpirajte. Naprava ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko zamenjal uporabnik sam. Naprave ne spreminjajte niti ne prilagajajte. Če pride do okvare, se obrnite na lokalnega predstavnika ali distributerja.

PODATKI O DISTRIBUTERJU

KONTAKTNI PODATKI PODJETJA MESI

Naslov MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, Evropska unija

Telefon +386 (0)1 620 34 87
E-naslov info@mesimedical.com
Spletno mesto www.mesimedical.com

UPORABNIŠKI RAČUNI

1. Registrirajte svoj uporabniški račun



Vsak uporabnik, ki uporablja enoto MESI mTABLET, mora registrirati svoj račun, ki mu bo omogočal varno dostopanje do podatkov tudi z drugimi napravami (namiznim ali tabličnim računalnikom ali, po potrebi, s telefonom).

2. Delovne skupine



Vsak zdravnik je lahko lastnik samo ene delovne skupine, povabljen pa je lahko v več delovnih skupin. V svojo delovno skupino lahko tudi doda več medicinskih sester ali zdravnikov. Medicinske sestre so lahko članice številnih delovnih skupin, same pa jih ne morejo ustvarjati ali vanje dodajati drugih posameznikov. Ta sistem omogoča boljši nadzor nad dostopom do podatkov o bolnikih.

MESI mRECORDS

Do spletne aplikacije MESI mRECORDS lahko dostopate z istimi prijavnimi podatki kot za MESI mTABLET, in sicer na spletnem naslovu <https://mrecords.mesimedical.com>. Ker je mRECORDS spletna aplikacija, vam omogoča dostop od koder koli in kadar koli. Vsa snemanja in podatki o bolniku se sinhronizirajo med tablico MESI mTABLET in aplikacijo mRECORDS, zato zdravstveni strokovnjak lahko takoj dostopa do evidentiranih snemanj.

Za več informacij in dostop do vadnic se prijavite oziroma registrirajte svoj račun na naslovu <https://mrecords.mesimedical.com>.

