



MESI

Simplifying Diagnostics

Snabbguide


MESI mTABLET

Trådlöst medicintekniskt Tablet-system


VAD FINNS I LÅDAN?

Medicinskt teknisk tablet-enhet


Modell
MTABMD

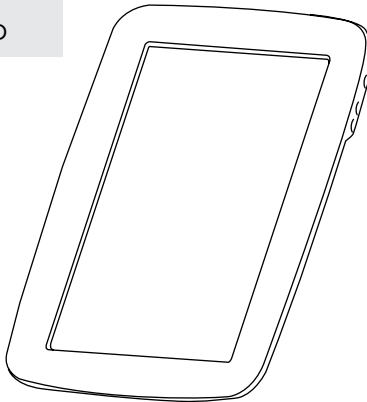

Skyddad ethernet-kabel - 2m

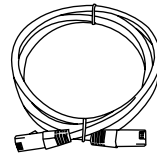


AC/DC strömförsörjning för
MTABDSW.

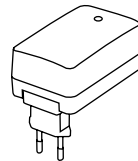

MESI mTABLET dockningsstation med åtkomtpunkt.


Modell
mTABDSMDW

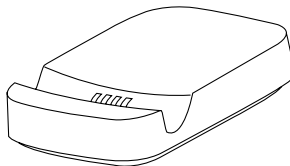

Innan enheten tas i bruk för första gången, läs noga igenom bruksanvisningen och följ rekommendationerna här: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Anslut dockning

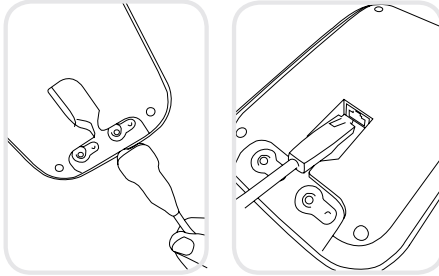

Anslut din laddningsstation till elnätet och till det lokala nätverket med nätverkskabeln och elkabeln som ingår.

2. MESI mTABLET inställning



Ladda MESI mTABLET helt innan första användning genom att sätta in den i laddaren.

När MESI mTABLET är helt laddad, tryck på ON/OFF-knappen på höger sida av tablet för att slå på enheten.

3. Första start



Eftersom MESI mTABLET erbjuder flera språk, välj önskat **språk** i rullgardinsmenyn. Den här inställningen kan ändras senare i användarinställningar.

Laddaren till MESI mTABLET kommer med **inbyggd Wi-Fi-anslutning** som MESI mTABLET ansluter till automatiskt vid första användningen.

Om ett annat trådlöst nätverk önskas, välj från listan och ange säkerhetsinformation.

Wi-Fi krävs inte för de väsentliga funktionerna på MESI mTABLET, men det är nödvändigt att mätningar synkroniseras med MESI mRECORDS webbapplikation.

PARNING AV DIAGNOSTISK MODUL

Innan några inspelningar kan göras, måste lämplig modul paras med din MESI mTABLET. Ta MESI mTABLET och öppna användarfilken.




Steg 1

Gå till **Användarprofil > Inställningar > Moduler > +Lägg till modul**

Steg 2

Tryck på knappen längst upp på lämplig modul.

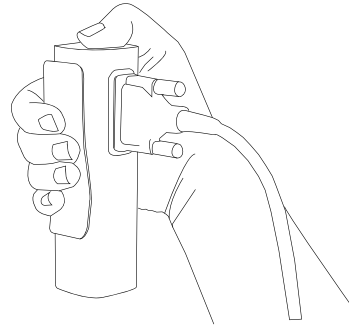

Steg 3

När MESI mTABLET upprättat en anslutning med modulen, ändras ljuset längst upp på modulen. Bekräfta parningsprocessen genom att trycka på knappen längst upp på modulen igen.



Steg 4

Slutskrmen anger en lyckad anslutning mellan MESI mTABLET och den trådlösa modulen. Du har tillgång till all teknisk information om modulerna i **Användarprofil > Inställningar > Moduler**.



VARNINGAR



Användare av MESI mTABLET måste ha rätt utbildning för att använda enheten. Innan första användning, måste användare noggrant läsa igenom hela bruksanvisningen och följa användarinstruktionerna för den anslutna utrustningen.



Använd bara tillbehör och andra delar rekommenderade eller levererade av MESI. Användning av andra än rekommenderade eller levererade delar kan resultera i skada, felaktig information och/eller skada på enheten.



Använd inte den här enheten i områden där det finns en explosionsrisk eller brandfarliga gaser såsom narkosmedel.



AC/DC-strömkabeln måste anslutas till en lättåtkomlig kontakt (AC/DC-strömkabeln fungerar även som galvanisk isolering). För att undvika elchock, montera inte isär enheten. Den innehåller inga reparerbara delar. Hänvisa service endast till kvalificerad personal.



Använd bara milda rengöringsmedel för att rengöra enheten. Enheten kan torkas av med en fuktig trasa.



Skydda enheten från fukt och vätskor och extremt höga/låga temperaturer. Skydda även enheten från mekanisk stress och utsätt den inte för direkt solljus, eftersom detta kan medföra att enheten inte fungerar ordentligt.



Utför aldrig reparationer av något slag själv. Öppna inte enheten. Enheten innehåller inga delar som kan bytas ut av användaren. Ändra inte eller anpassa enheten. Om ett fel uppstår, rådgör med din återförsäljare eller distributör.

DISTRIBUTÖRSINFORMATION

MESI KONTAKTINFORMATION

Adress MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Slovenien, Europeiska Unionen

Telefon +386 (0)1 620 34 87
E-post info@mesimedical.com
Webbsajt www.mesimedical.com

ANVÄNDARKONTON

1. Registrera ditt användarkonto

The screenshot shows the 'Register' screen of the MESI application. It features a form with the following fields: Email, Password, Confirm password, Security, Location, and Date. There are also checkboxes for 'Terms and agreement' and a 'Register' button at the bottom. A 'Login' tab is visible on the left.

The screenshot shows the 'Profile picture' selection screen. It displays a grid of 12 different avatars for the user to choose from. Below the grid are 'CANCEL' and 'OK' buttons.

Varje användare med tillträde till MESI mTABLET måste registrera ett konto, som även ger dem möjlighet att komma åt data säkert på andra enheter (dator, tablet eller telefon vid behov).

2. Arbetsgrupper

The screenshot shows the 'Working group' creation screen. It displays a form for creating a new working group named 'Carlos Blanco'. The form includes fields for Description, Sector, Practice name, Practice phone number, Practice fax number, Practice address, Practice email, and Practice website. There are 'CANCEL' and 'OK' buttons at the bottom.

Varje läkare kan vara ägare till endast en arbetsgrupp men kan bjudas in till flera arbetsgrupper. Samtidigt, kan läkaren lägga till flera sjuksköterskor eller läkare i sin arbetsgrupp. Sjuksköterskor, kan å andra sidan, vara en del av många arbetsgrupper, men de kan inte skapa en eller lägga till personer till den. Det här systemet möjliggör en bättre översikt av åtkomst av patientdata.

MESI_MRECORDS

MESI mRECORDS är tillgängligt med samma användarinloggning som för MESI mTABLET på <https://mrecords.mesimedical.com>. Eftersom mRECORDS är en webbapp ger det dig möjlighet till åtkomst var som helst ifrån och när som helst. Alla mätningar och all patientdata synkroniseras mellan MESI mTABLET och MESI mRECORDS, och ger därmed den medicinska experten åtkomst till registrerad data omedelbart.

För ytterligare information, logga in eller registrera ditt konto på <https://mrecords.mesimedical.com>.

